bti
Human
Technology

IMPLANTATLINIE
CORE



TRUSTED QUALITY 2017-2021
CLEAN IMPLANT

Human Technology

CORE

Der Kern für Ihre klinischen Entscheidungen

Das Ergebnis unserer Entwicklungen: Die **CORE-Implantatlinie – 6 Durchmesser in jeweils mehreren Längen –** für die Behandlung fast aller Indikationen.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE



KONISCHER IMPLANTATKÖRPER

Einfache Implantatinsertion in allen Knochenklassen durch einen selbstschneidenden Apex mit hohem Vorschub.

1 VERBINDUNG UND PROTHETISCHE PLATTFORM



Die vierlappige Innenverbindung hat ein ***Austrittsprofildurchmesser von 3,5 mm***.

Dadurch kann eine hohe Stabilität des periimplantären Weichgewebes erzielt und eine Versorgung mit einem limitierten interdentalen Platzangebot realisiert werden.


UnicCa®-OBERFLÄCHE



Die ***UnicCa®-Oberfläche*** ermöglicht eine ***höhere Knochenstabilität und eine verbesserte Osseointegration***.

WENIGER KOMPONENTEN

CORE-Implantate sparen ***Zeit*** und ***Kosten***: Wenige Bohrer und ein ***einfaches und übersichtliches Chirurgie-Kit***.

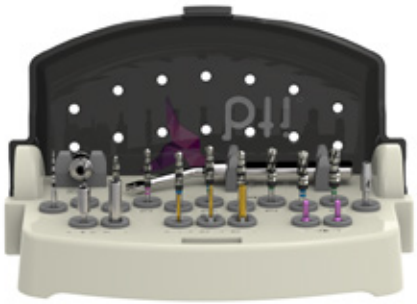

BIOBLOCK®-KONZEPT




CORE nutzt das biomechanische ***BioBlock®***-Konzept zur Gewährleistung ***der hermetischen Abdichtung und der biologischen Versiegelung***, wodurch der marginale Knochen um die Implantate herum besser erhalten bleibt.
Für ein breiteres Austrittsprofil stehen sich erweiternde Aufbauteile zur Verfügung.

Empfohlene Bohrsequenzen

Implantate mit Standardlänge

(von 8,5 bis 15 mm)

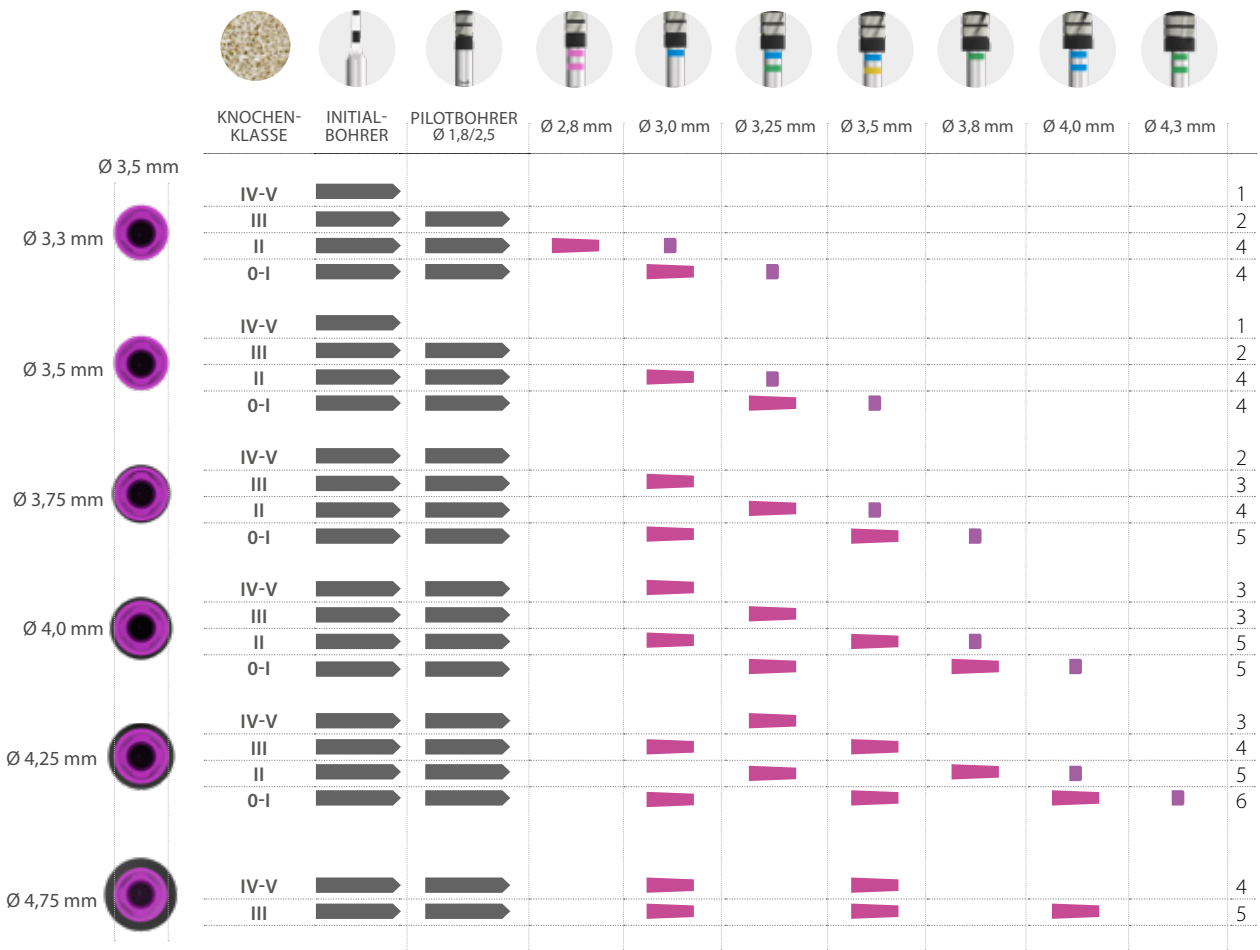

Gesamtlänge des Implantats

6,5 mm Bohrtiefe

2-3 mm Bohrtiefe


Typ	Hounsfield
I	1.050 - 1.400
II	850 - 1.000
III	550 - 800
IV	400 - 500
V	100 - 350

BOHRER	GESCHWINDIGKEIT	KÜHLUNG
Initialbohrer	800 - 1.000 U/min	ja
Bohrer	50 - 75 U/min	nein

Kurze Implantate

(5,5 - 6,5 - 7,5 mm)

Empfohlene Bohrsequenzen

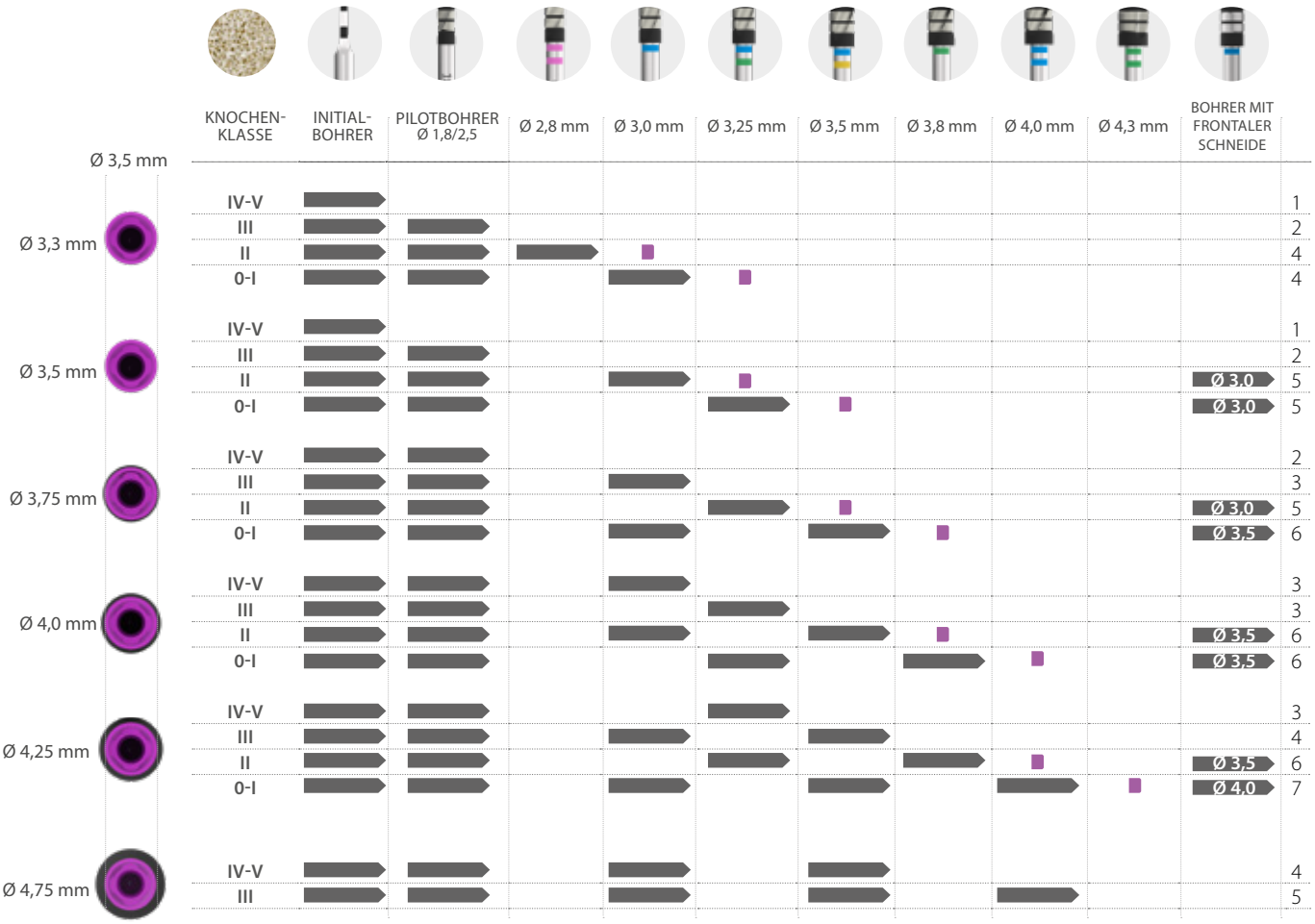

Gesamtlänge des Implantats


Ø X,X *Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers*

2-3 mm Bohrtiefe

Schmale Plattform

IMPLANTAT CORE

Prothetische Plattform: Ø 3,5 mm

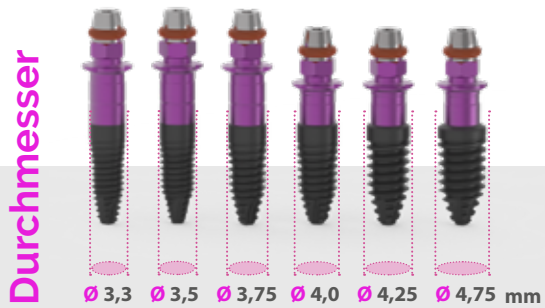


Unterschiedliche Längen je nach Durchmesser
von 5,5 mm bis 10, 13 oder 15 mm



Prothetische Versorgungsmöglichkeiten

der CORE-Implantate

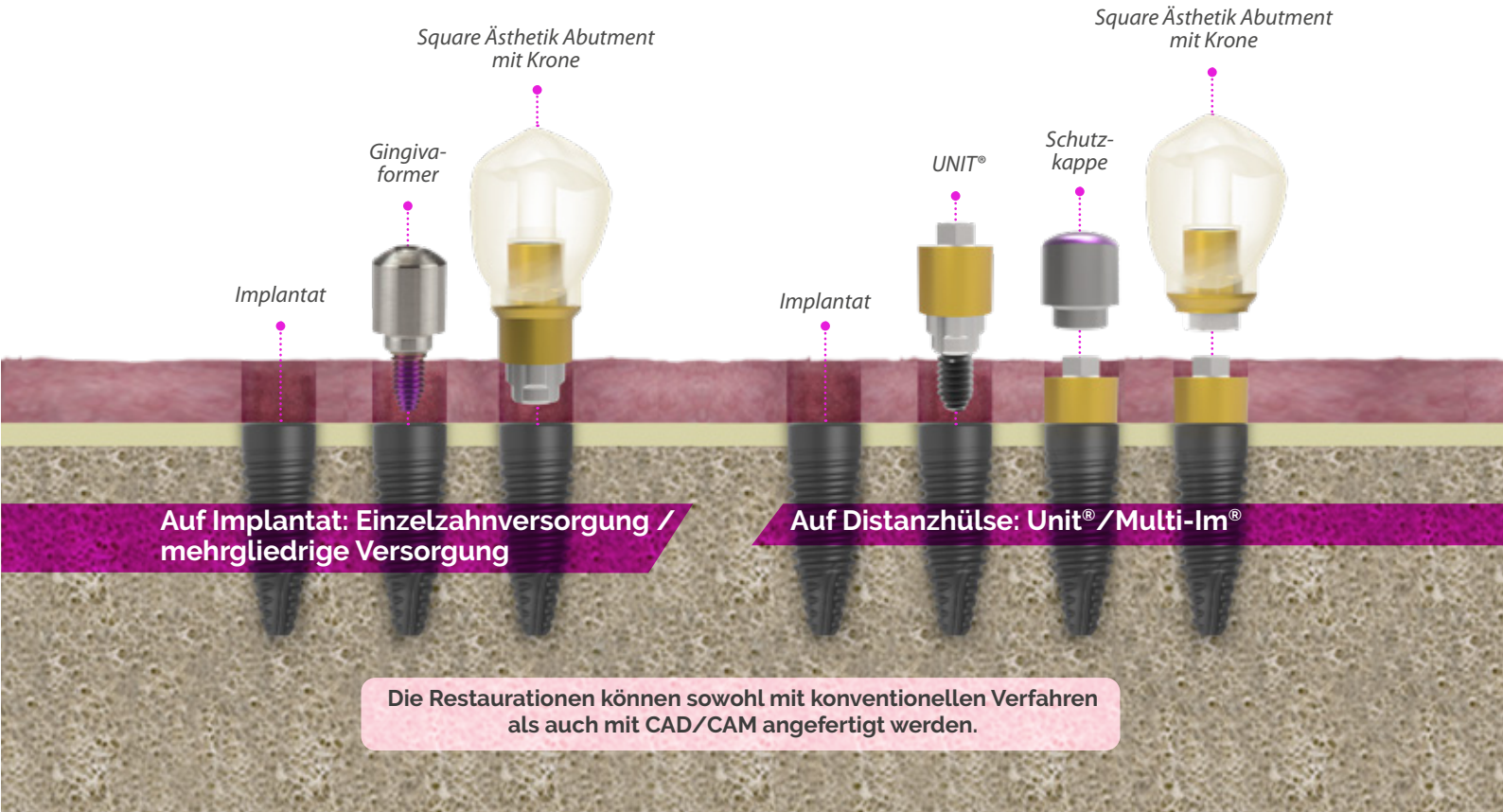

Die Restaurationen können sowohl mit konventionellen Verfahren als auch mit CAD/CAM angefertigt werden.

CAT199 DE · CAT. Implantes CORE · V.03 MAYO 2020

BTI Comercial
San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · SPANIEN
Tel.: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

B.T.I.
Biotechnology Institute S.L.
Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava) Spanien
bti.implantes@bti-implant.es

Niederlassungen

DEUTSCHLAND
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Germany
Tel.: +49 (0) 7231 428060
Fax: +49 (0) 7231 4280615
info@bti-implant.de

FRANKREICH
6 Avenue Neil Armstrong
Immeuble Le Lindbergh
33692 Merignac CEDEX · France
Tel.: (33) 5 56 18 11 18
info@bti-implant.fr

ITALIEN
C/o Regus Milano Linate
Viale E. Forlanini 23
20134 Milano (MI) · Italia
Tel.: +39 0270605067
info@bti-implant.it

MEXIKO
Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
Mexico DF · CP 11520 · Mexico
Tel.: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTUGAL
Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5º
4100-359 Porto · Portugal
Tel.: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

VEREINIGTES KÖNIGREICH
870 The Crescent
Colchester Business Park · Colchester
Essex CO49YQ · UK
Tel.: (44) 01206580160
Fax: (44) 01206580161
info@bti-implant.co.uk

USA
1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell. PA 19422-1802 · USA
Tel.: (1) 215 646 4067
Fax: (1) 215 646 4066
info@bti-implant.us

CleanImplant
Trusted Quality Mark
2017 - 2021

www.bti-biotechnologyinstitute.de
HINWEIS: Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Auskünfte über die Verfügbarkeit des Produktes in den verschiedenen Märkten zu erhalten.

BTI APP
PRODUKTNEUHEITEN
Version für iPhone / Smartphone
Version für iPad / Tablet ***(Inhalte ausschließlich für Kunden)***