GUIDE RAPIDE
INTERNA

bti
Human
Technology



*Prothèse **sur pilier***
UNIT® / MULTI-IM®

*Prothèse **directe sur implant***

Composants
pour surdentitions

Ce guide présente les solutions offertes par BTI au professionnel pour faire face à différentes situations chirurgicales et prothétiques dans sa pratique quotidienne.

Ce guide présente l'outillage nécessaire pour obtenir une fixation de tous les éléments sur l'implant ou le pilier. L'outillage tel que les tournevis et les clés de serrage utiles pendant le processus de restauration y figurent également.

Il présente le développement proposé pour chaque étape de restauration, (avec toutes les pièces indispensables pour la mener à bien) pour les cas des réalisations directes sur implant comme pour les cas des réalisations sur pilier, en différenciant toujours la plateforme utilisée. En cela, ce guide présente toutes les possibilités et en fonction de la solution prothétique choisie, indépendamment du fait qu'elle soit cémentée ou vissée, il suffira de suivre les indications détaillées. De plus, ce guide permet de visualiser les différents ajouts en précisant leur référence, diamètre et longueur.

bti
Human Technology

Plateforme **3.0** *Ø 3.0 mm*

Ø 2.5		Ø 3.0		Ø 3.3	
Réf.	**Longueur**	**Réf.**	**Longueur**	**Réf.**	**Longueur**
IIP3CA2555	5.5 mm	IIP3CA3055	5.5 mm	IIP3CA3355	5.5 mm
IIP3CA2565	6.5 mm	IIP3CA3065	6.5 mm	IIP3CA3365	6.5 mm
IIP3CA2575	7.5 mm	IIP3CA3075	7.5 mm	IIP3CA3375	7.5 mm
IIP3CA2585	8.5 mm	IIP3CA3085	8.5 mm	IIP3CA3385	8.5 mm
IIP3CA2510	10 mm	IIP3CA3010	10 mm	IIP3CA3310	10 mm
IIP3CA2511	11.5 mm	IIP3CA3011	11.5 mm	IIP3CA3311	11.5 mm
IIP3CA2513	13 mm	IIP3CA3013	13 mm	IIP3CA3313	13 mm

Plateforme **Étroite/CORE** *Ø 3.5 mm*

Ø 3.3		Ø 3.5		Ø 3.75		Ø 4.00		Ø 4.25		Ø 4.75	
Réf.	**Longueur**	**Réf.**	**Longueur**	**Réf.**	**Longueur**	**Réf.**	**Longueur**	**Réf.**	**Longueur**	**Réf.**	**Longueur**
IIPECA3355	5.5 mm	IIPECA3545	4.5 mm	IIPECA3745	4.5 mm	IIPECA4045	4.5 mm	IIPECA4245	4.5 mm	IIPECA4745	4.5 mm
IIPECA3365	6.5 mm	IIPECA3555	5.5 mm	IIPECA3755	5.5 mm	IIPECA4055	5.5 mm	IIPECA4255	5.5 mm	IIPECA4755	5.5 mm
IIPECA3375	7.5 mm	IIPECA3565	6.5 mm	IIPECA3765	6.5 mm	IIPECA4065	6.5 mm	IIPECA4265	6.5 mm	IIPECA4765	6.5 mm
IIPECA3385	8.5 mm	IIPECA3575	7.5 mm	IIPECA3775	7.5 mm	IIPECA4075	7.5 mm	IIPECA4275	7.5 mm	IIPECA4775	7.5 mm
IIPECA3310	10 mm	IIPECA3585	8.5 mm	IIPECA3785	8.5 mm	IIPECA4085	8.5 mm	IIPECA4285	8.5 mm	IIPECA4785	8.5 mm
IIPECA3311	11.5 mm	IIPECA3510	10 mm	IIPECA3710	10 mm	IIPECA4010	10 mm	IIPECA4210	10 mm	IIPECA4710	10 mm
IIPECA3313	13 mm	IIPECA3511	11.5 mm	IIPECA3711	11.5 mm	IIPECA4011	11.5 mm	IIPECA4211	11.5 mm	IIPECA4711	11.5 mm
IIPECA3315	15 mm	IIPECA3513	13 mm	IIPECA3713	13 mm	IIPECA4013	13 mm	IIPECA4213	13 mm		
		IIPECA3515	15 mm	IIPECA3715	15 mm						

Plateforme **Universelle** *Ø 4.1 mm*

Ø 3.5		Ø 3.75		Ø 4.0		Ø 4.25	
Réf.	**Longueur**	**Réf.**	**Longueur**	**Réf.**	**Longueur**	**Réf.**	**Longueur**
IIPUCA3555	5.5 mm	IIPUCA3755	5.5 mm	IIPUCA4055	5.5 mm	IIPUCA4255	5.5 mm
IIPUCA3565	6.5 mm	IIPUCA3765	6.5 mm	IIPUCA4065	6.5 mm	IIPUCA4265	6.5 mm
IIPUCA3575	7.5 mm	IIPUCA3775	7.5 mm	IIPUCA4075	7.5 mm	IIPUCA4275	7.5 mm
IIPUCA3585	8.5 mm	IIPUCA3785	8.5 mm	IIPUCA4085	8.5 mm	IIPUCA4285	8.5 mm
IIPUCA3510	10 mm	IIPUCA3710	10 mm	IIPUCA4010	10 mm	IIPUCA4210	10 mm
IIPUCA3511	11.5 mm	IIPUCA3711	11.5 mm	IIPUCA4011	11.5 mm	IIPUCA4211	11.5 mm
IIPUCA3513	13 mm	IIPUCA3713	13 mm	IIPUCA4013	13 mm	IIPUCA4213	13 mm
IIPUCA3515	15 mm	IIPUCA3715	15 mm	IIPUCA4015	15 mm	IIPUCA4215	15 mm

Plateforme **Universelle Plus** *Ø 4.1 mm*

Ø 4.5		Ø 5.0		Ø 5.5		Ø 6.0	
Réf.	**Longueur**	**Réf.**	**Longueur**	**Réf.**	**Longueur**	**Réf.**	**Longueur**
IIPSCA4545	4.5 mm	IIPSCA5045	4.5 mm	IIPSCA5545	4.5 mm	IIPSCA6045	4.5 mm
IIPSCA4555	5.5 mm	IIPSCA5055	5.5 mm	IIPSCA5555	5.5 mm	IIPSCA6055	5.5 mm
IIPSCA4565	6.5 mm	IIPSCA5065	6.5 mm	IIPSCA5565	6.5 mm	IIPSCA6065	6.5 mm
IIPSCA4575	7.5 mm	IIPSCA5075	7.5 mm	IIPSCA5575	7.5 mm	IIPSCA6075	7.5 mm
IIPSCA4585	8.5 mm	IIPSCA5085	8.5 mm	IIPSCA5585	8.5 mm	IIPSCA6085	8.5 mm
IIPSCA4510	10 mm	IIPSCA5010	10 mm	IIPSCA5510	10 mm	IIPSCA6010	10 mm
IIPSCA4511	11.5 mm	IIPSCA5011	11.5 mm	IIPSCA5511	11.5 mm	IIPSCA6011	11.5 mm
IIPSCA4513	13 mm	IIPSCA5013	13 mm	IIPSCA5513	13 mm		
IIPSCA4515	15 mm	IIPSCA5015	15 mm				



Forets et fraises BTI

Forets



Référence	Prof. forage
FICS	10 mm
FIL	15 mm

Référence	Ø	Prof. forage
F18CS	1,8	15 mm
F18LS	1,8	18 mm
F1825CS	1,8 > 2,5	15 mm
F1825LS	1,8 > 2,5	18 mm
F25CS	2,5	15 mm
F25LS	2,5	18 mm
F28CS	2,8	15 mm
F28LS	2,8	18 mm
F30CS	3,0	15 mm
F30LS	3,0	18 mm
F32CS	3,25	15 mm
F32LS	3,25	18 mm
F35CS	3,5	15 mm
F35LS	3,5	18 mm
F37CS	3,75	15 mm
F37LS	3,75	18 mm
F40CS	4,0	15 mm
F40LS	4,0	18 mm
F42CS	4,25	15 mm
F42LS	4,25	18 mm
F45CS	4,5	15 mm
F45LS	4,5	18 mm
F47CS	4,75	15 mm
F47LS	4,75	18 mm
F51CS	5,1	15 mm
F53CS	5,3	15 mm

Fraises cuvette



Référence		Ø	Prof. fraisage
INFAPUC	Plateforme Universelle courte	4,1	5 mm
INFAPUL	Plateforme Universelle longue	4,1	5 mm
INFAPSC	Plateforme Univ. Plus courte	4,5	4,5 mm
INFAPSL	Plateforme Univ. Plus longue	4,5	4,5 mm
INFAPAC	Plateforme Large courte	5,5 y 6	4,5 y 5,5 mm
INFAPAL	Plateforme Large longue	5,5 y 6	4,5 y 5,5 mm

Fraises de coupe frontale



Référence	Ø	Prof. fraisage
FCF25L	2,5	10 mm
FCF30L	3,0	10 mm
FCF35L	3,5	10 mm
FCF40L	4,0	10 mm
FCF45L	4,5	10 mm
FCF51L	5,1	10 mm
FCF55L	5,5	10 mm

Kit de forets jetables




Référence	Ø (mm)	Longueur
KFD1	Démarrage	15 mm
	Pilote 1,8 > 2.5 mm	18 mm
	Pilote 2,5 > 3.0 mm	18 mm
KFD2	Démarrage	15 mm
	Pilote 1,8 > 2.5 mm	18 mm
	Pilote 2,5 > 3.0 mm	18 mm
	Pilote 3,2 > 3.8 mm	18 mm


Expanseurs de crête BTI

EXPANSION


Implant 2,5 mm. ø Plateforme 3.0

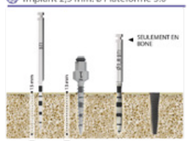

Implant 3,0 mm. ø Plateforme 3.0

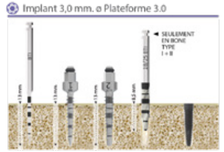


Implant 3,3 mm. ø Plateforme 3.0

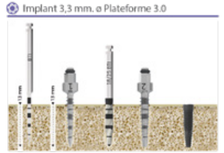


COMPACTAGE


Implant 3,3 mm. ø Plateforme Universelle

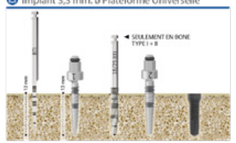


Implant 3,75 mm. ø Plateforme Universelle

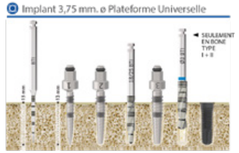

Implant 5,0 mm. ø Plateforme Large

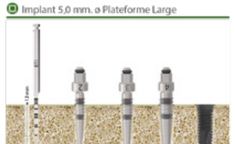

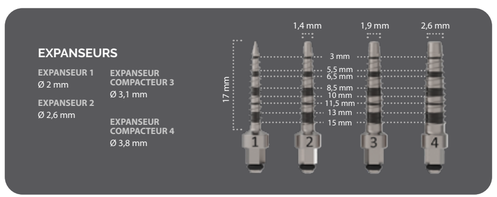

KEXCO



Description

Fraise de démarrage, courte
Jeu d'expanseurs
Jeu de compacteurs

Extenseur à clé à cliquet, court, long
Connecteur porte-implants, court, long
Boîte plastique stérilisable

Expanseurs



Référence	Description	Ø Apex	Ø Corps	Longueur
ECO1	Expanseur Nr. 1 long	-	2,0 mm	15,0 mm
ECO2	Expanseur Nr. 2 long	1,4 mm	2,6 mm	15,0 mm
ECO3	Expanseur Nr. 3 long	1,9 mm	3,1 mm	15,0 mm
ECO4	Expanseur Nr. 4 long	2,6 mm	3,8 mm	15,0 mm

Compacteurs




Référence	Description	Ø Apex	Ø Corps	Longueur
COMP1	Compacteur Nr. 1 court	-	2,0 mm	11,5 mm
COMP2	Compacteur Nr. 2 court	1,4 mm	2,6 mm	11,5 mm
COMP3	Compacteur Nr. 3 court	1,9 mm	3,1 mm	11,5 mm
COMP4	Compacteur Nr. 4 court	2,6 mm	3,8 mm	11,5 mm

IET Implants Expanseurs



Référence	Description	Ø (mm)	Longueur
IET2565	IET2565	2.5	6,5 mm
IET2585	IET2585	2.5	8,5 mm
IET2511	IET2511	2.5	11,5 mm

Implant Expanseur 2,5 mm. ø

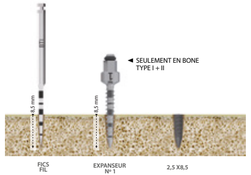

Accessoires chirurgicaux et prothétiques

Clé chirurgicale



Référence	Description
LLMQ	Clé chirurgicale dynamométrique **20 - 70 Ncm.**

Extenseur aplicateur

pour implant L: 4-5 mm

		Référence	Longueur
	Plateforme Étroite	INEAE24 INEAE29	24 mm 29 mm
	Plateforme Universelle	INEAU15 INEAU24 INEAU29	15 mm 22 mm 29 mm

pour le reste d'implants

		Référence	Longueur
	Plateforme 3.0	EAI324 EAI329	24 mm 29 mm
	Plateforme Étroite	EAIE24 EAIE29	24 mm 29 mm
	Plateforme Universelle, Plus y Large	EAI15 EAI24 EAI29	15 mm 24 mm 29 mm

Positionneur de Pilier UNIT

	Plateforme restaurative UNIT	Référence	Longueur
	Ø 3,5 mm	PTUPE16 PTUPE22	16 mm 22 mm
	Ø 4,1 mm	PTUPU16 PTUPU22	16 mm 22 mm
	Ø 5,5 mm	PTUPA16 PTUPA22	16 mm 22 mm

Clé de serrage prothétique



Référence	Description
LLMTP	Clé multi-couple avec adaptateurs pour pointes de vissage et piliers (MDPT1 et LLEC1) **10 - 35 Ncm.**

*Les adaptateurs **MDPT1** et **LLEC1** peuvent être achetés séparément.*

Tournevis

	Article	Référence	Longueur
	Tournevis hexagonal (grand hexagone)	DHG17 DHG24 DHG36	17 mm 24 mm 36 mm
	Tournevis carré	DC17 DC24 DC36	17 mm 24 mm 36 mm
	Tournevis pour piliers	DCE17 DCE24	17 mm 24 mm
	Instrument principal Locator	HPL	

Accessoires chirurgicaux et prothétiques

Pointes de clé de serrage

	Article	Référence	Longueur
	Grand hexagone Pans parallèles	PTHS16 PTHS22	16 mm 22 mm
	Carrés Pans parallèles	PTCS16 PTCS22	16 mm 22 mm
	Pour piliers Multi-Im,UNIT (Multi-IM: toutes les plateformes) (UNIT: plateforme Universelle et Étroite expansé)	PTTU16 PTTU22	16 mm 22 mm
	Pour pilier UNIT (Plateforme 3.0 y Étroite)	PTTE16 PTTE22	16 mm 22 mm
	Pour pilier UNIT (Plateforme large y Universelle expansé)	PTUA16 PTUA22	16 mm 22 mm
	Hexagonal orientable (pour angles de 0 a 15º)	PTHA16 PTHA22 PTHA28 PTHA34	16 mm 22 mm 28 mm 34 mm
	Hexagonal orientable (pour angles de 15 a 30º)	PTHB16 PTHB22 PTHB28 PTHB34	16 mm 22 mm 28 mm 34 mm
	Clef dynamométrique pour vis	PTPP22	22 mm
	Pour piliers Locator	PTTL15 PTTL21	15 mm 21 mm
	Pour piliers Dal-Bo	PTDO	16 mm

Pointes tournevis contre angle

	Article	Référence	Longueur
	Hexagonale (grand hexagone)	PHG17 PHG24 PHG30	17 mm 24mm 30 mm
	Grand hexagone Pans parallèles	PHS17 PHS24 PHS30	17 mm 24mm 30 mm
	Carrées	PDC17 PDC24 PDC30	17 mm 24 mm 30 mm
	Pour pilier Multi im / Unit (Étroit et Universel)	PDTU17 PDTU24 PDTU30	17 mm 24 mm 30 mm
	Pour Indicateur enr. occlusal	PDIRO24 PDIRO30	24 mm 30 mm
	Pour piliers Locator	PTL23 PTL29	23 mm 29 mm
	Pour piliers Titanmagnetics	TIXL-LLT	
	Plate. Attention: exclusivement pour Interna® sur plateforme universelle, universelle plus et large.	PDP24	24 mm

Prothèse ***sur pilier UNIT®***

Restaurations UNITAIRES vissées

Plateforme **3.0**
Ø 3,0 mm

UNIT® Expansé
pages 10-11

Plateforme **Étroite/CORE**
Ø 3,5 mm

UNIT® Droit
pages 10-11

UNIT® Expansé
pages 12-13

UNIT® Angulé
pages 24-25

Plateforme **Universelle/Plus**
Ø 4,1 mm

UNIT® Droit
pages 12-13

UNIT® Expansé
pages 14-15

UNIT® Angulé
pages 24-25

Plateforme **Large**
Ø 5,5 mm

UNIT® Droit
pages 14-15

UNIT®

*Prothèse **sur pilier***

bti

RESTAURATIONS UNITAIRES VISSÉES

UNIT

PILIER (Ti-Golden®) + CAPUCHON DE PROTECTION + PRISE D'EMPREINTE + ANALOGUE DE LABORATOIRE + PROTHÈSE PROVISOIRE// //PROTHÈSE DÉFINITIVE + CALCINABLE + VIS DE LABORATOIRE + VIS DÉFINITIVE

Plateforme ***3.0***

EXPANSÉ



IMPORTANT:
Implant de Ø 2,5 mm
NON COMPATIBLE

UNIT® Expansé


Référence	Hauteur
INTMIUP320	2,0 mm
INTMIUP325	2,5 mm
INTMIUP330	3,0 mm

35 Ncm.

Pointe de clé de serrage: ***PTTEXX***

Plateforme ***Étroite/CORE***

DROIT

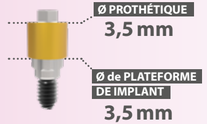

IMPORTANT:
Implant L: 4,5 mm
NON COMPATIBLE

UNIT® Droit

Référence	Hauteur
INTMIUPE3515	1,5 mm
INTMIUPE3520	2,0 mm
INTMIUPE3525	2,5 mm
INTMIUPE3530	3,0 mm
INTMIUPE3535	3,5 mm
INTMIUPE3540	4,0 mm
INTMIUPE3550	5,0 mm

35 Ncm.

Pointe de clé de serrage: ***PTTEXX***



Référence	Ø	Hauteur
TPMIUPE	3,5 mm	3,0 mm

10 Ncm.

CLASSIQUE



Transfert d'empreinte

Technique indirecte

Référence	Hauteur
CIMIUPE	10 mm

NUMÉRIQUE



Scan Body

Référence
SBIMIUPE

CLASSIQUE

Référence
RLMIUPE

NUMÉRIQUE



Analogue numérique

Référence
RDIMIUPE

PROVISOIRE

Cylindre

Référence (titane)
CPMIUPE

DÉFINITIVE

Interface esthétique Square (Ti-Golden®)

Référence	Hauteur	ø Prot.
IESMIUPE	3,5 mm	3,5 mm

Interface esthétique Square expansé (Ti-Golden®)

Référence	Hauteur	ø Prot.
IESMIUPEEX	3,5 mm	4,5 mm

Attention: *calcinables seulement pour les techniques conventionnelles de laboratoire*

Référence
CIESMIUPE

Référence
CIESMIUPEEX

Référence	Hauteur
TEMIR12	12 mm
TEMIR	15 mm
TEMIR20 (diamètre réduit)	20 mm

Ti Black
Référence
TTMIR
Pour interfaces/cylindres préfabriqués.
Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 0-15°
20 Ncm.

Ti Black
Référence
TTMI30 (hexagonale)
Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 15° - 30°
Non compatible avec des interfaces/cylindres préfabriqués.
20 Ncm.
Attention : *Hexagone uniquement compatible avec PTHBXX*

*Prothèse **sur pilier***


bti

RESTAURATIONS UNITAIRES VISSÉES

PILIER (Ti-Golden®) + CAPUCHON DE PROTECTION + PRISE D'EMPREINTE + ANALOGUE DE LABORATOIRE + PROTHÈSE PROVISOIRE// //PROTHÈSE DÉFINITIVE + CALCINABLE + VIS DE LABORATOIRE + VIS DÉFINITIVE

*Plateforme **Étroite/CORE***

EXPANSÉ

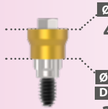

IMPORTANT:
Implant L: 4.5 mm
NON COMPATIBLE

UNIT® Expansé

Référence	Hauteur
INTMIUPE20	2,0 mm
INTMIUPE25	2,5 mm
INTMIUPE30	3,0 mm
INTMIUPE35	3,5 mm
INTMIUPE40	4,0 mm
INTMIUPE50	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***



Référence	Ø	Hauteur
TPMIUPU	4,0	3,5 mm
TPMIUPU5	4-5	3,5 mm
TPMIUPUEX	4-6	3,5 mm

10 Ncm.

CLASSIQUE

Transfert d'empreinte



Technique indirecte

Référence	Hauteur
CIMIUPU	10 mm

Technique Directe

Référence	Hauteur
CIDMIUPU	7,5 mm

Référence
SID (5 Unités)

NUMÉRIQUE

Scan Body

Référence
SBMIUPU

CLASSIQUE



Référence
RLMIUPU

NUMÉRIQUE

Analogue numérique



Référence
RDIMIUPU

PROVISOIRE

Cylindre



Référence (titane)
CPMIUPU



Référence (Esthétique)
CPMIUPUP

DÉFINITIVE

Interface esthétique Square (Ti-Golden®)

Référence	Hauteur	ø Prot.
IESMIUPU	3,5 mm	4,1 mm
IESMIUPUL	6,5 mm	4,1 mm

Interface esthétique Square expansé (Ti-Golden®)

Référence	Hauteur	ø Prot.
IESMIUPUEX	3,5 mm	5,1 mm

***Attention:** calcinables seulement pour les techniques conventionnelles de laboratoire*

Référence
CIESMIUPU
CIESMIUPUL
CIESMIUPUEX

Cylindre calcinable UNIT

PUCMIUPU


Référence	Hauteur
TEMIR12	12 mm
TEMIR	15 mm
TEMIR20 (diamètre réduit)	20 mm

Ti Black
Référence
TTMIR
Pour interfaces/cylindres préfabriqués.
Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 0-15°
20 Ncm.

Ti Black
Référence
TTMI30 (hexagonale)
Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 15° - 30°
Uniquement compatible avec la réf. IESMIUPUEX
20 Ncm.
***Attention :** Hexagone uniquement compatible avec PTHBXX*

*Plateforme **Universelle/Plus***

DROIT

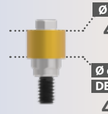

IMPORTANT:
Implant L: 4.5 mm
NON COMPATIBLE

UNIT® Droit

Référence	Hauteur
INTMIUPU15	1,5 mm
INTMIUPU20	2,0 mm
INTMIUPU25	2,5 mm
INTMIUPU30	3,0 mm
INTMIUPU35	3,5 mm
INTMIUPU40	4,0 mm
INTMIUPU50	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***

UNIT®

*Prothèse **sur pilier***

bti

RESTAURATIONS UNITAIRES VISSÉES

UNIT

PILIER (Ti-Golden®)	+ CAPUCHON DE PROTECTION	+ PRISE D'EMPREINTE	+ ANALOGUE DE LABORATOIRE	+ PROTHÈSE PROVISOIRE//	//PROTHÈSE DÉFINITIVE	+ CALCINABLE	+ VIS DE LABORATOIRE	+ VIS DÉFINITIVE

*Plateforme **Universelle/Plus***

EXPANSÉ



IMPORTANT:
Implant L: 4.5 mm
NON COMPATIBLE

UNIT® Expansé

Référence	Hauteur
INTMIUPUEX20	2,0 mm
INTMIUPUEX25	2,5 mm
INTMIUPUEX30	3,0 mm
INTMIUPUEX35	3,5 mm
INTMIUPUEX40	4,0 mm

35 Ncm.

Pointe de clé de serrage: ***PTUAXX***



Référence	Ø	Hauteur
TPMIUPA	5,5	3,5 mm
TPMIUPAEX	5,5-7	3,5 mm

10 Ncm.

CLASSIQUE

Transfert d'empreinte



Référence	Hauteur
CIMIUPA	10 mm

NUMÉRIQUE

Scan Body



Référence
SBIMIUPA

CLASSIQUE



Référence
RLMIUPA

NUMÉRIQUE

Analogue numérique



Référence
RDIMIUPA

PROVISOIRE

Cylindre



Référence (titane)
CPMIUPA



Référence (Esthétique)
CPMIUPAP

DÉFINITIVE

Interface esthétique Square (Ti-Golden®)



Référence	Hauteur	ø Prot.
IESMIUPA	3,5 mm	5,5 mm

Interface esthétique Square expansé (Ti-Golden®)



Référence		
IESMIUPAEX	3,5 mm	6,5 mm

Cylindre calcinable



PUCMIUPA

Attention: *calcinables seulement pour les techniques conventionnelles de laboratoire*



Référence
CIESMIUPA



CIESMIUPAEX


Référence	Hauteur
INTEIU (long)	20,6 mm



Référence
TTMIUPA (hexagonale)
Pour interfaces/cylindres préfabriqués.
Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 0-15°
20 Ncm.

*Plateforme **Large***

DROIT

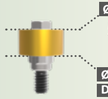

UNIT® Droit

Référence	Hauteur
INTMIUPA20	2,0 mm
INTMIUPA25	2,5 mm
INTMIUPA30	3,0 mm
INTMIUPA35	3,5 mm
INTMIUPA40	4,0 mm

35 Ncm.

Pointe de clé de serrage: ***PTUAXX***

Prothèse ***sur pilier***

Restaurations MULTIPLES vissées ***MULTI-IM®***

Plateforme 3.0
Ø 3,0 mm

MULTI-IM® Expansé

pages 18-19 *Ø 3,5*
pages 20-21 *Ø 4,1*

Plateforme Étroite/CORE
Ø 3,5 mm

MULTI-IM® Droit

pages 18-19 *Ø 3,5*

MULTI-IM® Expansé

pages 20-21 *Ø 4,1*
pages 22-23 *Ø 5,5*

MULTI-IM® Angulé

pages 24-25

Plateforme Universelle/Plus
Ø 4,1 mm

MULTI-IM® Droit

pages 20-21 *Ø 4,1*

MULTI-IM® Expansé

pages 22-23 *Ø 5,5*

MULTI-IM® Angulé

pages 24-25

Plateforme Large
Ø 5,5 mm

MULTI-IM® Droit

pages 22-23

MULTI-IM® *Prothèse **sur pilier***

Emergence prothétique 3,5 mm

bti

RESTAURATIONS MULTIPLES VISSÉES

TRANSEPITELIAL (Ti-Golden®) + CAPUCHON DE PROTECTION + PRISE D'EMPREINTE + ANALOGUE DE LABORATOIRE + PROTHÈSE PROVISOIRE// //PROTHÈSE DÉFINITIVE + VIS DE LABORATOIRE + VIS DÉFINITIVE

*Plateforme **3.0***

EXPANSÉ



Ø PROTHÉTIQUE **3,5 mm**

Ø de PLATEFORME DE IMPLANT **3,0 mm**

IMPORTANT:
Implant L: Ø 2,5 mm
NON COMPATIBLE

MULTI-IM® Expansé


Référence	Hauteur
INTMIP33505	0,5 mm
INTMIP33510	1,0 mm
INTMIP33515	1,5 mm
INTMIP33520	2,0 mm
INTMIP33525	2,5 mm
INTMIP33530	3,0 mm
INTMIP33535	3,5 mm
INTMIP33540	4,0 mm
INTMIP33550	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***

*Plateforme **Étroite/CORE***

DROIT

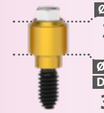

Ø PROTHÉTIQUE **3,5 mm**

Ø de PLATEFORME DE IMPLANT **3,5 mm**

IMPORTANT:
Implant L: 4.5 mm
NON COMPATIBLE

MULTI-IM® Droit

Référence	Hauteur
INTMIPE3505	0,5 mm
INTMIPE3510	1,0 mm
INTMIPE3515	1,5 mm
INTMIPE3520	2,0 mm
INTMIPE3525	2,5 mm
INTMIPE3530	3,0 mm
INTMIPE3535	3,5 mm
INTMIPE3540	4,0 mm
INTMIPE3550	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***



Référence	Ø	Hauteur
TPMIPE	3,5	3,5 mm

10 Ncm.

CLASSIQUE

Transfert d'empreinte



Técnica indirecta

Référence	Ø	Hauteur
CIMIPE	3,5	9,0 mm

Indicateur enr. occlusal



Référence	Ø	Hauteur
IROMIPE	3,5	9,0 mm

NUMÉRIQUE

Scan Body



Référence
SBIMIPE

CLASSIQUE

Référence
RLMIPE

NUMÉRIQUE

Analogue numérique

Référence
RDIMIPE

PROVISOIRE

Cylindre



Référence (titane)
CPMIPE

Référence (Esthétique)
CPMIPEP

DÉFINITIVE

Interface esthétique (Ti-Golden®)



Référence	Hauteur	ø Prot.
IESMIPE	4,0 mm	4,0 mm

Interface esthétique expansé (Ti-Golden®)



Référence	Hauteur	ø Prot.
IESMIPEEX	4,0 mm	4,5 mm



Référence	Hauteur
TEMIR12	12 mm
TEMIR	15 mm
TEMIR20	20 mm

(diamètre réduit)



Ti Black
Référence
TTMIR (hexagonale)

Pour interfaces/cylindres préfabriqués.

Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 0-15°

20 Ncm.

MULTI-IM® *Prothèse sur pilier*


bti

RESTAURATIONS MULTIPLES VISSÉES

PILIER (Ti-Golden®) + **CAPUCHON DE PROTECTION** + **PRISE D'EMPREINTE** + **ANALOGUE DE LABORATOIRE** + **PROTHÈSE PROVISOIRE //** **//PROTHÈSE DÉFINITIVE** + **CALCINABLE** + **VIS DE LABORATOIRE** + **VIS DÉFINITIVE**

Plateforme ***3.0***

EXPANSÉ

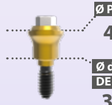

MULTI-IM® Expansé

pour implant Ø2,5

Référence	Hauteur
INTMIP32505	0,5 mm
INTMIP32510	1,0 mm
INTMIP32515	1,5 mm
INTMIP32520	2,0 mm
INTMIP32525	2,5 mm
INTMIP32530	3,0 mm
INTMIP32535	3,5 mm
INTMIP32540	4,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***

pour implants Ø3.0 / 3.3

Référence	Hauteur
INTMIP305	0,5 mm
INTMIP310	1,0 mm
INTMIP315	1,5 mm
INTMIP320	2,0 mm
INTMIP325	2,5 mm
INTMIP330	3,0 mm
INTMIP335	3,5 mm
INTMIP340	4,0 mm
INTMIP350	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***

MULTI-IM® Expansé

pour implant. L: 4,5 mm

Référence	Hauteur
INTMIPE4520	2,0 mm
INTMIPE4525	2,5 mm
INTMIPE4530	3,0 mm
INTMIPE4535	3,5 mm
INTMIPE4540	4,0 mm
INTMIPE4550	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***

pour le reste d'implants


Référence	Hauteur
INTMIPE05	0,5 mm
INTMIPE10	1,0 mm
INTMIPE15	1,5 mm
INTMIPE20	2,0 mm
INTMIPE25	2,5 mm
INTMIPE30	3,0 mm
INTMIPE35	3,5 mm
INTMIPE40	4,0 mm
INTMIPE50	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***

Plateforme ***Étroite/CORE***

EXPANSÉ

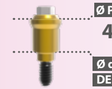

MULTI-IM® Expansé

pour implant. L: 4,5 mm

Référence	Hauteur
INTMIPE4520	2,0 mm
INTMIPE4525	2,5 mm
INTMIPE4530	3,0 mm
INTMIPE4535	3,5 mm
INTMIPE4540	4,0 mm
INTMIPE4550	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***

pour le reste d'implants

Référence	Hauteur
INTMIPE05	0,5 mm
INTMIPE10	1,0 mm
INTMIPE15	1,5 mm
INTMIPE20	2,0 mm
INTMIPE25	2,5 mm
INTMIPE30	3,0 mm
INTMIPE35	3,5 mm
INTMIPE40	4,0 mm
INTMIPE50	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***

Plateforme ***Universelle/Plus***

DROIT



MULTI-IM® Droit

pour implant. L: 4,5 mm

Référence	Hauteur
INTMIPU4520	2,0 mm
INTMIPU4525	2,5 mm
INTMIPU4530	3,0 mm
INTMIPU4535	3,5 mm
INTMIPU4540	4,0 mm
INTMIPU4550	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***

pour le reste d'implants

Référence	Hauteur
INTMIPU05	0,5 mm
INTMIPU10	1,0 mm
INTMIPU15	1,5 mm
INTMIPU20	2,0 mm
INTMIPU25	2,5 mm
INTMIPU30	3,0 mm
INTMIPU35	3,5 mm
INTMIPU40	4,0 mm
INTMIPU50	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***

CAPUCHON DE PROTECTION

Référence	Ø	Hauteur
TPMIEU	4,0	4,0 mm

10 Ncm.

Référence	Ø	Hauteur
TPMIEU1	4,0	3,0 mm

10 Ncm.

Référence	Ø	Hauteur
TPMIPU5	4-5	4,0 mm

10 Ncm.

Référence	Ø	Hauteur
TPMIPUEX	4-6	4,0 mm

10 Ncm.

PRISE D'EMPREINTE

CLASSIQUE

Transfert d'empreinte

Technique indirecte Référence	Ø	Hauteur
CIMIPEU	4,0	9,0 mm

Indicateur enr. occlusal

Référence	Ø	Hauteur
IROMIEU1	4,0	6,0 mm
IROMIEU	4,0	9,0 mm

NUMÉRIQUE

Scan Body

Référence
SBIMPEU

ANALOGUE DE LABORATOIRE

CLASSIQUE

Référence
RLMIEU

NUMÉRIQUE

Analogue numérique

Référence
RDIMIEU

PROTHÈSE PROVISOIRE //

PROVISOIRE

Cylindre

Référence (titane)
CPMIPEU

Référence (Esthétique)
CPMIPEUP

Barres articulées

Hauteur de balle			
3,5 mm	BAP1	BAP2A	BAP2B
4,5 mm	BAP1A	BAP2C	BAP2D

BAP3

//PROTHÈSE DÉFINITIVE

DÉFINITIVE

Interface esthétique (Ti-Golden®)

Référence	Hauteur	ø Prot.
IESMIPU	4,2 mm	4,3 mm

Interface esthétique expansé (Ti-Golden®)

Référence	Hauteur	ø Prot.
IESMIPUEX	4,2 mm	5,0 mm

Cylindre

Référence (or)
COMIPEU

Référence (calcinable)
CCMIPEU

CALCINABLE

***Attention:** calcinables seulement pour les techniques conventionnelles de laboratoire*

Référence
CIESMIPU

Référence
CIESMIPUEX

VIS DE LABORATOIRE

Référence	Hauteur
TEMIR12	12 mm
TEMIR	15 mm
TEMIR20 (diamètre réduit)	20 mm

VIS DÉFINITIVE

Ti Black
Référence
TTMIR (hexagonale)
Pour interfaces/cylindres préfabriqués.
Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 0-15°
20 Ncm.

Ti Black
Référence
TTMI30 (hexagonale)
Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 15° - 30°
Uniquement compatible avec la réf. IESMIPUEX
20 Ncm.
***Attention :** Hexagone uniquement compatible avec PTHBXX*

MULTI-IM® *Prothèse sur pilier*

bti

RESTAURATIONS MULTIPLES VISSÉES

PILIER (Ti-Golden®) + CAPUCHON DE PROTECTION + PRISE D'EMPREINTE + ANALOGUE DE LABORATOIRE + PROTHÈSE PROVISOIRE// //PROTHÈSE DÉFINITIVE + CALCINABLE + VIS DE LABORATOIRE + VIS DÉFINITIVE

Plateforme Étroite/CORE

EXPANSÉ



MULTI-IM® Expansé

pour implant. L: 4,5 mm

Référence	Hauteur
INTMIPEEX4520	2,0 mm
INTMIPEEX4525	2,5 mm
INTMIPEEX4530	3,0 mm
INTMIPEEX4535	3,5 mm
INTMIPEEX4540	4,0 mm
INTMIPEEX4550	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***

pour le reste d'implants

Référence	Hauteur
INTMIPEEX15	1,5 mm
INTMIPEEX20	2,0 mm
INTMIPEEX25	2,5 mm
INTMIPEEX30	3,0 mm
INTMIPEEX35	3,5 mm
INTMIPEEX40	4,0 mm
INTMIPEEX50	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***

Plateforme Universelle/Plus

EXPANSÉ



MULTI-IM® Expansé

pour implant. L: 4,5 mm

Référence	Hauteur
INTMIPUEX4520	2,0 mm
INTMIPUEX4525	2,5 mm
INTMIPUEX4530	3,0 mm
INTMIPUEX4535	3,5 mm
INTMIPUEX4540	4,0 mm
INTMIPUEX4550	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***

pour le reste d'implants


Référence	Hauteur
INTMIPUEX10	1,0 mm
INTMIPUEX15	1,5 mm
INTMIPUEX20	2,0 mm
INTMIPUEX25	2,5 mm
INTMIPUEX30	3,0 mm
INTMIPUEX35	3,5 mm
INTMIPUEX40	4,0 mm
INTMIPUEX50	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***

Plateforme Large

DROIT

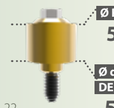


MULTI-IM® Droit

Référence	Hauteur
INTMIPA10	1,0 mm
INTMIPA20	2,0 mm
INTMIPA25	2,5 mm
INTMIPA30	3,0 mm
INTMIPA40	4,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTTUXX***

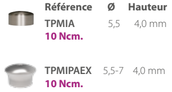

Référence	Ø	Hauteur
TPMIA	5,5	4,0 mm
10 Ncm.		
TPMIPAEX	5,5-7	4,0 mm
10 Ncm.		

CLASSIQUE

Transfert d'empreinte



Technique indirecte

Référence	Ø	Hauteur
CIMIPA	5,5	9,0 mm

Indicateur enr. occlusal



Référence	Ø	Hauteur
IROMIA	5,5	9,0 mm

NUMÉRIQUE

Scan Body



Référence
SBIMIPA

CLASSIQUE



Référence
RLMIA

NUMÉRIQUE

Analogue numérique



Référence
RDIMIA

PROVISOIRE

Cylindre



Référence (titane)
CPMIPA



Référence (Esthétique)
CPMIPAP

Barres articulées



Hauteur de balle			
3,5 mm	BAPA1	BAPA2A	BAPA2B
4,5 mm	BAPA1A	BAPA2C	BAPA2D



BAP3

DÉFINITIVE

Interface esthétique (Ti-Golden®)



Référence	Hauteur	ø Prot.
IESMIPA	4,2 mm	5,5 mm

Interface esthétique expansé (Ti-Golden®)



Référence	Hauteur	ø Prot.
IESMIPAEX	4,2 mm	6,5 mm

Cylindre



Référence (or)
COMIPA

Référence (calcinable)
CCMIPA



Référence (titane pour zirconium)
CZMIPA

***Attention:** calcinables seulement pour les techniques conventionnelles de laboratoire*



Référence
CIESMIPA



Référence
CIESMIPAEX



Référence	Hauteur
TEMIR12	12 mm
TEMIR	15 mm
TEMIR20 (diamètre réduit)	20 mm



Ti Black
Référence
TTMIR (hexagonale)

Pour interfaces/cylindres préfabriqués.

Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 0-15°

20 Ncm.



Ti Black
Référence
TTMI30 (hexagonale)

Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 15° - 30°

Non compatible avec des interfaces/cylindres préfabriqués.


20 Ncm.

***Attention :** Hexagone uniquement compatible avec PTHBXX*

Prothèse sur pilier

PILIER (Ti-Golden®) + CAPUCHON DE PROTECTION + PRISE D'EMPREINTE + ANALOGUE DE LABORATOIRE + PROTHÈSE PROVISOIRE// //PROTHÈSE DÉFINITIVE + CALCINABLE + VIS DE LABORATOIRE + VIS DÉFINITIVE

Plateforme Étroite/CORE

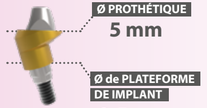

IMPORTANT:
Implant L: 4.5 mm
NON COMPATIBLE

UNIT®/MULTI-IM® Angulé 17°

Référence	Hauteur
INTMIPEB15	1,5 mm
INTMIPEB20	2,0 mm
INTMIPEB30	3,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTHSXX***

UNIT®/MULTI-IM® Angulé 30°

Référence	Hauteur
INTMIPEC15	1,5 mm
INTMIPEC20	2,0 mm
INTMIPEC30	3,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTHSXX***

Plateforme Universelle/Plus



IMPORTANT:
Implant L: 4.5 mm
NON COMPATIBLE

UNIT®/MULTI-IM® Angulé 17°

Référence	Hauteur
INTMIPUB15	1,5 mm
INTMIPUB20	2,0 mm
INTMIPUB30	3,0 mm
INTMIPUB40	4,0 mm
INTMIPUB50	5,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTHSXX***

UNIT®/MULTI-IM® Angulé 30°

Référence	Hauteur
INTMIPUC15	1,5 mm
INTMIPUC20	2,0 mm
INTMIPUC30	3,0 mm

35 Ncm.

*Pointe de clé de serrage: **PTHSXX***

CAPUCHON DE PROTECTION



Référence	Ø	Hauteur
TPMIEUA	5,0	5,0 mm

10 Ncm.

PRISE D'EMPREINTE

CLASSIQUE

Unitaire

Transfert d'empreinte



Technique indirecte

Référence	Ø	Hauteur
CIMIUPUA	5,0	10 mm

Multiple

Transfert d'empreinte



Technique indirecte

Référence	Ø	Hauteur
CIMIPEUA	5,0	10 mm

Indicateur enr. occlusal

Référence	Ø	Hauteur
IROMIEUA	4,0	9,0 mm

NUMÉRIQUE

Unitaire

Scan Body



Référence
SBIMIUPUA

Multiple

Scan Body



Référence
SBIMIUPUA

ANALOGUE DE LABORATOIRE

CLASSIQUE



Référence
RLMIEUA

NUMÉRIQUE

Analogue numérique



Référence
RDIMIEUA

PROTHÈSE PROVISOIRE

Unitaire

Cylindre



Référence (titane)
CPMIUPUA

Multiple

Cylindre



Référence (titane)
CPMIPEUA

PROTHÈSE DÉFINITIVE

Unitaire

Interface esthétique Square



Référence	Hauteur	ø Prot.
IESMIUPUA	3,7 mm	5,5 mm

Multiple

Interface esthétique



Référence	Hauteur	ø Prot.
IESMIPUA	4,7 mm	5,1 mm

Cylindre

Référence (calcinable)
CCMIPEUA

CALCINABLE

***Attention:** calcinables seulement pour les techniques conventionnelles de laboratoire*

Unitaire



Référence
CIESMIUPUA

Multiple



Référence
CIESMIPUA

VIS DE LABORATOIRE



Référence	Hauteur
TEMIR12	12 mm
TEMIR	15 mm
TEMIR20	20 mm

(diamètre réduit)

VIS DÉFINITIVE

Ti Black
Référence
TTMIR (hexagonale)
Pour interfaces/cylindres préfabriqués.
Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 0-15° (indépendamment de l'angle du pilier)
20 Ncm.

Ti Black
Référence
TTMI30 (hexagonale)
Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 15° - 30° (indépendamment de l'angle du pilier)
Non compatible avec des interfaces/cylindres préfabriqués.
20 Ncm.
***Attention :** Hexagone uniquement compatible avec PTHBXX*

Prothèse
directe sur implant

Plateforme **3.0**
Ø 3,0 mm
pages 28-29

Plateforme **Étroite/CORE**
Ø 3,5 mm
pages 30-31

Plateforme **Universelle/Plus**
Ø 4,1 mm
pages 32-33

Plateforme **Large**
Ø 5,5 mm
pages 34-35

*Prothèse **directe sur implant***

PILIER DE CICATRISATION	+	PRISE D'EMPREINTE	+	ANALOGUE DE LABORATOIRE	+	PROTHÈSE PROVISOIRE //	// PROTHÈSE DÉFINITIVE	+	VIS D'ESSAYAGE / LABORATOIRE	+	VIS DÉFINITIVE

PILIER DE CICATRISATION

Droit



Référence	Ø	Hauteur
INPC3R33	3,0	3mm
INPC3R34	3,0	4mm

20 Ncm.

Réduit



Référence	Ø	Hauteur
INPC3RRE33	3,0 - 1,8	3,0 mm
INPC3RRE34	3,0 - 1,8	4,0 mm

20 Ncm.

IMPORTANT:
Implants Ø 2,5 seulement pour les restaurations trans-vissées au MULTI-IM® INTMIP325XX
(page 18)

PRISE D'EMPREINTE

CLASSIQUE

Transfert d'empreinte



TECHNIQUE INDIRECTE

Référence	Ø	Hauteur
INCII33	3,0	12,0 mm

NUMÉRIQUE

Scan Body



Référence
SBII31

ANALOGUE DE LABORATOIRE

CLASSIQUE

Référence
INRLI3

NUMÉRIQUE

Analogue numérique



Référence
INRDII3

PROTHÈSE PROVISOIRE //

PROVISOIRE

Cylindre provisoire titane



Référence
INCPI30 (Pivotant)
INCPI31 (Non pivotant)

// PROTHÈSE DÉFINITIVE

DÉFINITIVE

CÉMENTER ET TRANS-VISSER

Pilier esthétique Square*
(Ti-Golden*)

Non pivotants



Référence	Ø	Hauteur
INPESP30	3.0	0,0 mm
INPESP31	3.0	1,0 mm
INPESP32	3.0	2,0 mm

** Ces pièces s'utilisent avec des vis de rétention spécifiques.*



Référence (calcinable)
CPESPE

***Attention:** calcinables seulement pour les techniques conventionnelles de laboratoire*

CÉMENTER

Biopilier® titane
(Ti-Golden*)



Référence	Ø	Hauteur
INPPT3B33	3.4	3,0 mm
INPPT3B34	3.4	4,0 mm

VIS D'ESSAYAGE / LABORATOIRE

Vis de laboratoire Square

Référence	Hauteur
INTEPESPE	21,0 mm

Vis de laboratoire



Référence	Hauteur
INTEIU16 (court)	16.1 mm
INTEIU (long)	20,6 mm

VIS DÉFINITIVE

Vis spécifique (incluse)

Référence
INTTUHCR

35 Ncm.

Vis universelle

Or
Référence
INTOOC (carré)
35 Ncm

Ti Black
Art. - Nr.
INTTUH (hexagonal)
35 Ncm

*Prothèse **directe sur implant***

PILIER DE CICATRISATION

Droit



Référence	Ø	Hauteur
INPCER31	3,5	1,0 mm
INPCER32	3,5	2,0 mm
INPCER33	3,5	3,0 mm
INPCER34	3,5	4,0 mm
INPCER35	3,5	5,0 mm
INPCER36	3,5	6,0 mm
INPCER38	3,5	8,0 mm
INPCER42	4,5	2,0 mm
INPCER43	4,5	3,0 mm
INPCER44	4,5	4,0 mm
INPCER45	4,5	5,0 mm
INPCER46	4,5	6,0 mm
INPCER48	4,5	8,0 mm

20 Ncm.

Réduit



Référence	Ø	Hauteur
INPCERRE33	3,5-2	3,0 mm
INPCERRE34	3,5-2	4,0 mm

20 Ncm.

IMPORTANT:
Implant L: 4.5 mm
NON COMPATIBLE

PRISE D'EMPREINTE

CLASSIQUE

Transfert d'empreinte

TECHNIQUE INDIRECTE

(Non pivotants)



Référence	Ø	Hauteur
INCIIE31	3,5	9,0 mm
INCIIE3	3,5	12,0 mm
INCIIE41	4,5	9,0 mm
INCIIE4	4,5	12,0 mm

(Pivotants)



Référence	Ø	Hauteur
INCIRIE51	5,0	9,0 mm
INCIRIE5	5,0	12,0 mm

TECHNIQUE DIRECTE

Référence	Ø	Hauteur
INCIDE2	3,5	8,5 mm
INCIDE3	3,5	9,5 mm
INCIDE4	3,5	10,5 mm

SID (5 Unités)

NUMÉRIQUE

Scan Body

Référence
SBIIE1

ANALOGUE DE LABORATOIRE

CLASSIQUE



Référence
INRLIE

NUMÉRIQUE

Analogue numérique



Référence
INRDIIE

PROTHÈSE PROVISOIRE //

PROVISOIRE

Cylindre provisoire titane



Référence
INCPIE1 (Non pivotant)
INCPIE0 (Pivotant)

Cylindre provisoire esthétique



Référence
INCPIEP1 (Non pivotant)
INCPIEP0 (Pivotant)
20 Ncm.

// PROTHÈSE DÉFINITIVE

DÉFINITIVE

CÉMENTER ET TRANS-VISSER

Pilier esthétique Square*

(Ti-Golden®)

Non pivotant



Référence	Ø	Hauteur
INPESPE0	3,5	0,0 mm
INPESPE1	3,5	1,0 mm
INPESPE2	3,5	2,0 mm
INPESPE3	3,5	3,0 mm

Pivotant



Référence	Ø	Hauteur
INPESPER0	3,5	0,0 mm

** Ces pièces s'utilisent avec des vis de rétention spécifiques.*



Référence (calcinable)
CPESPE

***Attention:** calcinables seulement pour les techniques conventionnelles de laboratoire.*

CÉMENTER

Biopilier® titane

(Ti-Golden®)



Référence	Ø	Hauteur
INPPTEB33	3,5	3,0 mm
INPPTEB34	3,5	4,0 mm

Référence	Ø	Hauteur
INPPTEB43	4,2	3,0 mm
INPPTEB44	4,2	4,0 mm

Biopilier® titane Angulé 15°

(Ti-Golden®)

Référence	Ø	Hauteur
INPPTEAB43	3,75/4,2	3,0 mm
INPPTEAB44	3,75/4,2	4,0 mm
INPPTEAB45	3,75/4,2	5,0 mm

VISSER

Pilier UCLA



Référence (calcinable)
INPUCE1 (Non pivotant)
INPUCE0 (Pivotant)

VIS D'ESSAYAGE / LABORATOIRE

Vis de laboratoire Square

Référence	Hauteur
INTEPESPE	21,0 mm

Vis de laboratoire



Référence	Hauteur
INTEIU16 (court)	16.1 mm
INTEIU (long)	20.6 mm

Vis d'essayage



Référence
INTTLH (5 Unités)
(hexagonal)

VIS DÉFINITIVE

Vis spécifique (incluse)

Référence
INTTUHCR
35 Ncm.

Vis universelle



Or
Référence
INTOOC (carré)
35 Ncm.



Ti Black
Référence
INTTUH (hexagonal)
35 Ncm.



Ti Black
Référence
INTTUHR (hexagonal)
Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 0-15°
Non compatible avec des interfaces/cylindres préfabriqués.
20 Ncm.



Ti Black
Référence
INTTUH30
Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 15° - 30°
Non compatible avec des interfaces/cylindres préfabriqués.
20 Ncm.
***Attention :** Hexagone uniquement compatible avec PTHBXX*

*Prothèse **directe sur implant***

PILIER DE CICATRISATION + **PRISE D'EMPREINTE** + **ANALOGUE DE LABORATOIRE** + **PROTHÈSE PROVISOIRE //** **// PROTHÈSE DÉFINITIVE** + **VIS D'ESSAYAGE / LABORATOIRE** + **VIS DÉFINITIVE**

Droit

Référence	Ø	Hauteur
INPCUR41	4,0	1,0 mm
INPCUR42	4,0	2,0 mm
INPCUR43	4,0	3,0 mm
INPCUR44	4,0	4,0 mm
INPCUR45	4,0	5,0 mm
INPCUR46	4,0	6,0 mm
INPCUR48	4,0	8,0 mm
INPCURS2	5,0	2,0 mm
INPCURS3	5,0	3,0 mm
INPCURS4	5,0	4,0 mm
INPCURS5	5,0	5,0 mm
INPCURS6	5,0	6,0 mm
INPCURS8	5,0	8,0 mm

20 Ncm.

Expansé

Référence	Ø	Hauteur
INPCUREX45	4-6	5,0 mm
INPCUREX46	4-6	6,0 mm
INPCUREX47	4-6	7,0 mm

20 Ncm.

Réduit

Référence	Ø	Hauteur
INPCURRE43	4,0-2,5	3,0 mm
INPCURRE44	4,0-2,5	4,0 mm

20 Ncm.

IMPORTANT:
Implant L: 4.5 mm
NON COMPATIBLE

CLASSIQUE

Transfert d'empreinte

TECHNIQUE INDIRECTE
(Non pivotants)

Référence	Ø	Hauteur
INCIIU41	4,0	9,0 mm
INCIIU4	4,0	12,0 mm
INCIIU51	5,0	9,0 mm
INCIIU5	5,0	12,0 mm

(Pivotants)

Référence	Ø	Hauteur
INCIRIU51	5,0	9,0 mm
INCIRIU5	5,0	12,0 mm

TECHNIQUE DIRECTE

Référence	Ø	Hauteur
INCIDU2	4,0	8,5 mm
INCIDU3	4,0	9,5 mm
INCIDU4	4,0	10,5 mm

SID (5 Unités)

NUMÉRIQUE

Scan Body

Référence
SBIIU1

CLASSIQUE

Référence
INRLIU

NUMÉRIQUE

Analogue numérique

Référence
INRDIIU

PROVISOIRE

VISSER

Cylindre provisoire titane

Référence
INCPIU1
(Non pivotant)

INCPIU0
(Pivotant)

Biopilier® provisoire titane

Référence	Ø	Hauteur
INCPIUB13	5,0	3,0 mm
INCPIUB14	5,0	4,0 mm

(Non pivotant)

Référence	Ø	Hauteur
INCPIUB03	5,0	3,0 mm
INCPIUB04	5,0	4,0 mm

(Pivotant)

Cylindre provisoire esthétique

Référence
INCPIUP1
(Non pivotant)
20 Ncm.

INCPIUP0
(Pivotant)
20 Ncm.

CÉMENTER

Pilier provisoire Esthétique

Référence	Ø	Hauteur
INPPUP44	4,0	4,0 mm

20 Ncm.

Référence	Ø	Hauteur
INPPUP54	5,0	4,0 mm

20 Ncm.

DÉFINITIVE

CÉMENTER ET TRANS-VISSER

Pilier esthétique Square
(Ti-Golden*)

(Non pivotants)

Référence	Ø	Hauteur
INPESPU0	4,1	0,0 mm
INPESPU1	4,1	1,0 mm
INPESPU2	4,1	2,0 mm
INPESPU3	4,1	3,0 mm

(Pivotants)

Référence	Ø	Hauteur
INPESPUR0	4,1	0,0 mm

Référence (calcinable)
CPESPU

Attention: *calcinables seulement pour les techniques conventionnelles de laboratoire*

CÉMENTER

Pilier de titane

Référence	Ø	Hauteur
INPPTU42	4,1	2,0 mm
INPPTU44	4,1	4,0 mm
INPPTU52	5,0	2,0 mm
INPPTU53	5,0	3,0 mm
INPPTU54	5,0	4,0 mm
INPPTU56	5,0	6,0 mm
INPPTU62	6,0	2,0 mm
INPPTU63	6,0	3,0 mm
INPPTU64	6,0	4,0 mm

Pilier de titane Angulé 15°

Référence	Ø	Hauteur
INPPTUA52	5,0	2,0 mm
INPPTUA54	5,0	4,0 mm

CÉMENTER

Pilier anatomique (Titane) 15°

Référence	Ø	Hauteur
INPPTUA42	4,3/5,0	2,0 mm
INPPTUA44	4,3/5,0	4,0 mm

Biopilier® titane
(Ti-Golden*)

Référence	Ø	Hauteur
INPPTUB53	5,0	3,0 mm
INPPTUB54	5,0	4,0 mm
INPPTUB55	5,0	5,0 mm

Biopilier® Angulé 15° (Titane) (Ti-Golden*)

Référence	Ø	Hauteur
INPPTUAB53	5,0	3,0 mm
INPPTUAB54	5,0	4,0 mm
INPPTUAB55	5,0	5,0mm

Pilier CERAMIC-ON®

Référence (titane)	Ø
INPPCTU	5,0

VISSER

Pilier UCLA

Référence (or)
INPUOU1 (Non pivotant)
INPUOU0 (Pivotant)

Référence (calcinable)
INPUCU1 (Non pivotant)
INPUCU0 (Pivotant)

Vis de laboratoire

Référence	Hauteur
INTEIU16 (court)	16,1 mm
INTEIU (long)	20,6 mm

Vis d'essayage

Référence
INTTLH (5 Unités)
(hexagonal)

Or
Référence
INTOOC (carré)
35 Ncm.

Ti Black
Référence
INTTUH (hexagonale)
35 Ncm.

Ti Black
Référence
INTTUHR
(hexagonale)
Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 0-15°

Non compatible avec des interfaces/cylindres préfabriqués.
20 Ncm.

Ti Black
Référence
INTTUH30

Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 15° - 30°

Non compatible avec des interfaces/cylindres préfabriqués.
20 Ncm.
Attention : *Hexagone uniquement compatible avec PTHBXX*

Prothèse **directe sur implant**

PILIER DE CICATRISATION + PRISE D'EMPREINTE + ANALOGUE DE LABORATOIRE + PROTHÈSE PROVISOIRE // // PROTHÈSE DÉFINITIVE + VIS D'ESSAYAGE / LABORATOIRE + VIS DÉFINITIVE

Droit



Référence	Ø	Hauteur
INPCAR51	5,5	1,0 mm
INPCAR52	5,5	2,0 mm
INPCAR53	5,5	3,0 mm
INPCAR54	5,5	4,0 mm
INPCAR55	5,5	5,0 mm
INPCAR56	5,5	6,0 mm
INPCAR58	5,5	8,0 mm



INPCAR62	6,5	2,0 mm
INPCAR63	6,5	3,0 mm
INPCAR64	6,5	4,0 mm
INPCAR65	6,5	5,0 mm

20 Ncm.

Expansé



Référence	Ø	Hauteur
INPCAREX55	5,5-7	5,0 mm
INPCAREX56	5,5-7	6,0 mm
INPCAREX57	5,5-7	7,0 mm

20 Ncm.

CLASSIQUE

Transfert d'empreinte

TECHNIQUE INDIRECTE

(Non pivotants)



Référence	Ø	Hauteur
INCIIA51	5,5	9,0 mm
INCIIA5	5,5	12,0 mm
INCIIA61	6,5	9,0 mm
INCIIA6	6,5	12,0 mm

(Pivotants)



Référence	Ø	Hauteur
INCIRIA51	5,5	9,0 mm
INCIRIA5	5,5	12,0 mm

TECHNIQUE DIRECTE

Référence	Ø	Hauteur
INCIDA	5,5	8,5 mm

NUMÉRIQUE

Scan Body



Référence
SBIIA1

CLASSIQUE



Référence
INRLIA

NUMÉRIQUE

Analogue numérique



Référence
INRDIIA

PROVISOIRE

Cylindre provisoire de titane



Référence
INCPIA1
(Non pivotant)

Référence
INCPIA0
(Pivotant)

Cylindre provisoire esthétique



Référence
INCPIAP1
(Non pivotant)
20 Ncm.

DÉFINITIVE

CÉMENTER ET TRANS-VISSER

Pilier esthétique Square (Ti-Golden*)

(Non pivotants)



Référence	Ø	Hauteur
INPESPA0	5,5	0,0 mm



INPESPA1	5,5	1,0 mm
INPESPA2	5,5	2,0 mm



Référence (calcinable)
CPESPA

Attention: *calcinables seulement pour les techniques conventionnelles de laboratoire*

CÉMENTER

Pilier de titane (Ti-Golden*)



Référence	Ø	Hauteur
INPPTA52	5,5	2,0 mm
INPPTA54	5,5	4,0 mm
INPPTA56	5,5	6,0 mm



INPPTA62	6,5	2,0 mm
INPPTA64	6,5	4,0 mm
INPPTA66	6,5	6,0 mm



INPPTA74	7,5	4,0 mm

Pilier de titane Angulé 15° (Ti-Golden*)



Référence	Ø	Hauteur
INPPTAA52	5,5	2,0 mm
INPPTAA54	5,5	4,0 mm

VISSER

Pilier UCLA



Référence (or)
INPUOA1 (Non pivotant)
INPUOA0 (Pivotant)



Référence (calcinable)
INPUCA0 (Pivotant)

Vis de laboratoire



Référence	Hauteur
INTEIU16 (court)	16,1 mm
INTEIU (long)	20,6 mm

Vis d'essayage



Référence
INTTLH (5 Unités)
(hexagonale)

Or

Référence
INTOOC (carré)
35 Ncm.

Ti Black

Référence
INTTUH (hexagonale)
35 Ncm.

Ti Black



Référence
INTTUHR
(hexagonale)
Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 0-15°
Non compatible avec des interfaces/cylindres préfabriqués.
20 Ncm.

Ti Black

Référence
INTTUH30
Pour structures usinées sur Cad Cam avec angle 15° - 30°
Non compatible avec des interfaces/cylindres préfabriqués.
20 Ncm.
Attention : *Hexagone uniquement compatible avec PTHBXX*

Composants pour ***surdentitions***

Plateforme **Étroite/CORE**
Ø 3,5 mm
pages 38-39

Plateforme **Universelle/Plus**
Ø 4,1 mm
pages 40-41

Plateforme **Large**
Ø 5,5 mm
pages 42-43

Composants pour ***surdentitions***

PILIER DE CICATRISATION

Droit



Référence	Ø	Hauteur
INPCER31	3,5	1,0 mm
INPCER32	3,5	2,0 mm
INPCER33	3,5	3,0 mm
INPCER34	3,5	4,0 mm
INPCER35	3,5	5,0 mm
INPCER36	3,5	6,0 mm
INPCER38	3,5	8,0 mm
INPCER42	4,5	2,0 mm
INPCER43	4,5	3,0 mm
INPCER44	4,5	4,0 mm
INPCER45	4,5	5,0 mm
INPCER46	4,5	6,0 mm
INPCER48	4,5	8,0 mm

20 Ncm.

Réduit



Référence	Ø	Hauteur
INPCERRE33	3,5-2	3,0 mm
INPCERRE34	3,5-2	4,0 mm

20 Ncm.

IMPORTANT:
Implant L: 4.5 mm
NON COMPATIBLE

PRISE D'EMPREINTE

CLASSIQUE

Transfert d'empreinte

TECHNIQUE INDIRECTE

(Non pivotants)



Référence	Ø	Hauteur
INCIIE31	3,5	9,0 mm
INCIIE3	3,5	12,0 mm
INCIIE41	4,5	9,0 mm
INCIIE4	4,5	12,0 mm

(Pivotants)



Référence	Ø	Hauteur
INCIRIE51	5,0	9,0 mm
INCIRIE5	5,0	12,0 mm

TECHNIQUE DIRECTE

Référence	Ø	Hauteur
INCIDE2	3,5	8,5 mm
INCIDE3	3,5	9,5 mm
INCIDE4	3,5	10,5 mm

SID (5 Unités)

NUMÉRIQUE

Scan Body

Référence
SBIIE1

ANALOGUE DE LABORATOIRE

CLASSIQUE



Référence
INRLIE

NUMÉRIQUE

Analogue numérique



Référence
INRDIIE

PILIER LOCATOR



Référence	Hauteur
PLIE10	1,0 mm
PLIE20	2,0 mm
PLIE30	3,0 mm
PLIE40	4,0 mm

30 Ncm.

TRANSFERT D'EMPREINTE



Référence
CIL (4 Unités)

ANALOGUE FEMELLE



Référence
RLL4 (4 Unités)

JEU DE MÂLES

Jeu de mâles



Référence
JML2 (2 Unités)
JML10 (10 Unités)

Mâles pièce de rechange

Référence	Rétention	Angle
MLRA (4 Unités)	extra légère	0-10º
MLRR (4 Unités)	légère	0-10º
MLST (4 Unités)	forte	0-10º
MLAR (4 Unités)	extra légère	10-20º
MLAN (4 Unités)	légère	10-20º
MLAV (4 Unités)	forte	10-20º
MLAG (4 Unités)	sans rétention	10-20º

Composants pour ***surdentitions***

bti

PILIER DE CICATRISATION + PRISE D'EMPREINTE + ANALOGUE DE LABORATOIRE + PILIER + TRANSFERT D'EMPREINTE + ANALOGUE FEMELLE + ÉLÉMENTS DE RÉTENTION

Droit



Référence	Ø	Hauteur
INPCUR41	4,0	1,0 mm
INPCUR42	4,0	2,0 mm
INPCUR43	4,0	3,0 mm
INPCUR44	4,0	4,0 mm
INPCUR45	4,0	5,0 mm
INPCUR46	4,0	6,0 mm
INPCUR48	4,0	8,0 mm
INPCUR52	5,0	2,0 mm
INPCUR53	5,0	3,0 mm
INPCUR54	5,0	4,0 mm
INPCUR55	5,0	5,0 mm
INPCUR56	5,0	6,0 mm
INPCUR58	5,0	8,0 mm

20 Ncm.

Expansé



Référence	Ø	Hauteur
INPCUREX45	4-6	5,0 mm
INPCUREX46	4-6	6,0 mm
INPCUREX47	4-6	7,0 mm

20 Ncm.

Réduit



Référence	Ø	Hauteur
INPCURRE43	4,0-2,5	3,0 mm
INPCURRE44	4,0-2,5	4,0 mm

20 Ncm.

IMPORTANT:
Implant L: 4,5 mm
NON COMPATIBLE

CLASSIQUE

Transfert d'empreinte

TECHNIQUE INDIRECTE
(Non pivotants)

Référence	Ø	Hauteur
INCIIU41	4,0	9,0 mm
INCIIU4	4,0	12,0 mm
INCIIU51	5,0	9,0 mm
INCIIU5	5,0	12,0 mm

(Pivotants)



Référence	Ø	Hauteur
INCIRIU51	5,0	9,0 mm
INCIRIU5	5,0	12,0 mm

TECHNIQUE DIRECTE

Référence	Ø	Hauteur
INCIDU2	4,0	8,5 mm
INCIDU3	4,0	9,5 mm
INCIDU4	4,0	10,5 mm

SID (5 Unités)

NUMÉRIQUE

Scan Body

Référence
SBIIU1

CLASSIQUE

Référence
INRLIU

NUMÉRIQUE

Analogue numérique

Référence
INRDIIU

Pilier Locator

Référence	Hauteur
PLIU10	1,0 mm
PLIU20	2,0 mm
PLIU30	3,0 mm
PLIU40	4,0 mm

30 Ncm.

Pilier Dalbo®



Référence	Hauteur
INMTD2	2,0 mm
INMTD3	3,0 mm
INMTD4	4,0 mm

20 Ncm.

Pilier Titanmagnetics



Référence	Ø	Hauteur
TIXL-4835IU	4,8	3,5 mm

20 Ncm.

Transfert d'empreinte



Référence
CIL (4 Unités)

Analogue femelle

Référence
RLL4 (4 Unités)

Jeu de mâles



Référence
JML2 (2 Unités)
JML10 (10 Unités)

Mâles pièce de rechange

Référence	Rétention	Angle
MLRA (4 Unités)	extra légère	0-10º
MLRR (4 Unités)	légère	0-10º
MLST (4 Unités)	forte	0-10º
MLAR (4 Unités)	extra légère	10-20º
MLAN (4 Unités)	légère	10-20º
MLAV (4 Unités)	forte	10-20º
MLAG (4 Unités)	sans rétention	10-20º

Femelles Dalbo®



Référence
HTDS (standard)
HTDP (plus)

Aimant surdentition



Référence	Hauteur
TIXL-S265	2.65 mm

Manchette de positionnement



Référence
TIXL-MPS

Composants pour ***surdentitions***

PILIER DE CICATRISATION	+	PRISE D'EMPREINTE	+	ANALOGUE DE LABORATOIRE	+	PILIER DALBO®	+	FEMELLES DALBO®

PILIER DE CICATRISATION

Droit



Référence	Ø	Hauteur
INPCAR51	5,5	1,0 mm
INPCAR52	5,5	2,0 mm
INPCAR53	5,5	3,0 mm
INPCAR54	5,5	4,0 mm
INPCAR55	5,5	5,0 mm
INPCAR56	5,5	6,0 mm
INPCAR58	5,5	8,0 mm



INPCAR62	6,5	2,0 mm
INPCAR63	6,5	3,0 mm
INPCAR64	6,5	4,0 mm
INPCAR65	6,5	5,0 mm

20 Ncm.

Expansé



Référence	Ø	Hauteur
INPCAREX55	5,5-7	5,0 mm
INPCAREX56	5,5-7	6,0 mm
INPCAREX57	5,5-7	7,0 mm

20 Ncm.

PRISE D'EMPREINTE

CLASSIQUE

Transfert d'empreinte



TECHNIQUE INDIRECTE
(Non pivotants)

Référence	Ø	Hauteur
INCIIA51	5,5	9,0 mm
INCIIA5	5,5	12,0 mm
INCIIA61	6,5	9,0 mm
INCIIA6	6,5	12,0 mm

(Pivotants)



Référence	Ø	Hauteur
INCIRIA51	5,5	9,0 mm
INCIRIA5	5,5	12,0 mm

TECHNIQUE DIRECTE

Référence	Ø	Hauteur
INCIDA	5,5	8,5 mm

NUMÉRIQUE

Scan Body



Référence
SBIIA1

ANALOGUE DE LABORATOIRE

CLASSIQUE



Référence
INRLIA

NUMÉRIQUE

Analogue numérique



Référence
INRDIIA

PILIER DALBO®



Référence	Hauteur
INMTD2	2,0 mm
INMTD3	3,0 mm
INMTD4	4,0 mm

20 Ncm.

FEMELLES DALBO®



Référence
HTDS (standard)
HTDP (plus)

Human Technology

Pour simplifier la lecture de ce guide, nous détaillons ci-dessous la signification des symboles qui y sont les plus fréquemment utilisés, il s'agit d'un code de couleurs pour les différentes plateformes:

- Produit compatible pour Implant Interna® 3.0.
- Produit compatible pour Implant Interna® Étroite/CORE.
- Produit compatible pour Implant Interna® Universelle.
- Produit compatible pour Implant Interna® Universelle Plus.
- Produit compatible pour Implant Interna® Large.
- Produit compatible pour Implant Expansor.

CleanImplant Trusted Quality Mark
2017 - 2023

BTI Comercial
San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · ESPAÑA
Tel: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

B.T.I.
Biotechnology Institute S.L.
Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci ,14
01510 Miñano (Álava) España
bti.implantes@bti-implant.es

Filiales

ALLEMAGNE
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Deutschland
Tel: +49 7231 428060
Fax: +49 7231 4280615
info@bti-implant.de

FRANCE
6 Avenue Neil Armstrong
Immeuble Le Lindbergh
33692 Merignac CEDEX · France
Tel: +33 (5) 54530209
serviceclient@bti-implant.fr

ITALIE
C/o Regus Milano Linate
Viale E. Forlanini 23
20134 Milano (MI) · Italia
Tel: +39 0270605067
info@bti-implant.it

MEXIQUE
Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
Messico DF · CP 11520 · Messico
Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTUGAL
Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5º
4100-359 Porto · Portogallo
Tel: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

ROYAUME-UNI
3 Churchill Court, Manor Royal,
Crawley, West Sussex, RH10 9LU
Tlf: +44 02039 661873
customerservice@bti-implant.co.uk

USA
4040 NE 2nd AVE Ste 401
Moore Building
MIAMI, FL 33137-3549
Cell: 610 209 6040
Office: 866 646 4067
bti@bti-implant.us

www.bti-biotechnologyinstitute.com

REMARQUE : Veuillez consulter la disponibilité du produit sur les différents marchés auprès de chaque distributeur.